

A.4080.1

A.4080.1.6

procto  plus

sapi med

SURGICAL
LINE

Divaricatore anale regolabile, fenestrato,
autoilluminante. Monouso e sterile.

*Adjustable, fenestrated, self-lighting anal retractor.
Disposable. Sterile.*




Il ProctoPlus è un divaricatore anale, monouso e versatile, che può considerarsi l'evoluzione dell'Eisenhammer.

È composto da due valve di cui una fenestrata e un'impugnatura a due leve per una divaricazione controllata. La vite collocata sullo snodo delle due leve blocca le valve nella divaricazione desiderata.

ProctoPlus is a versatile, single-use anal retractor that can be considered the evolution of the Eisenhammer retractor.

It consists of two blades, one of which is fenestrated, and two levers for a controlled opening.

A screw - positioned at the junction of the two levers - can lock the blades in the selected position.

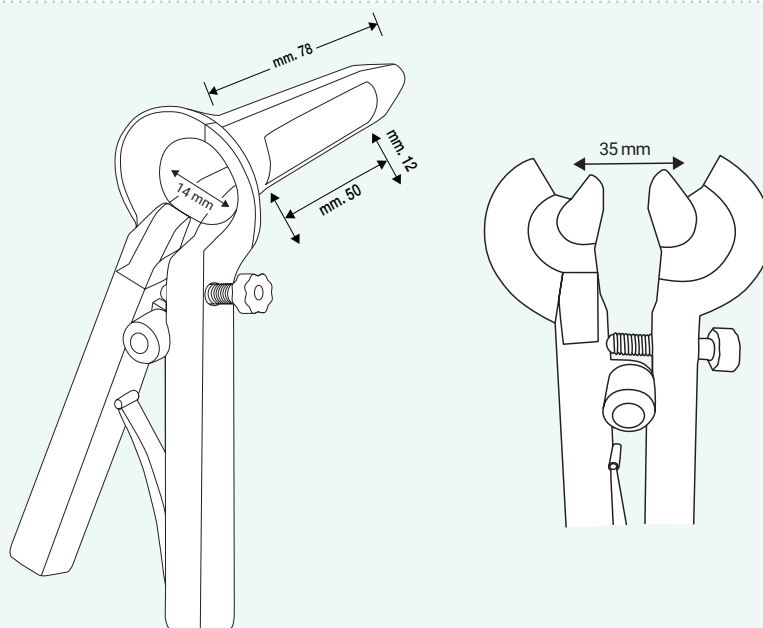

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sterile.
- Illuminabile con le fonti di luce Sapi Med.
- Perfettamente trasparente per una visione a 360°.
- Utilizzabile in ambulatorio per le dimensioni pediatriche.
- Introduzione atraumatica.
- Divaricazione delle valve modulabile e fissabile.
- Divaricazione massima delle valve 35mm.
- Autostaticità per interventi in sala operatoria a mani libere.
- Fenestrazione laterale per interventi su mucosa eccedente.

TECHNICAL FEATURES

- Sterile.
- Compatible with Sapi Med light sources.
- Perfectly transparent for 360° vision.
- Suitable for outpatient use due to the pediatric size.
- Atraumatic insertion.
- Adjustable and lockable blade opening.
- Maximum blade opening: 35 mm.
- Self-retaining for hands-free procedures in the operating room.
- Lateral fenestration for procedures on excess mucosa.

La leva di sinistra è cava per accogliere una fonte luminosa. Il fascio di luce viene magnificato e convogliato dalla barra ottica posizionata all'estremità della leva nei pressi delle valve, esattamente nel punto in cui si deve operare.

L'ampia fenestrazione rettangolare sulla valva di destra consente di intervenire sulla mucosa che protrude all'interno.

Il materiale plastico con cui è realizzato rende ProctoPlus molto maneggevole e leggero, con una visibilità ottimale.

Le valve dello strumento quando sono accostate, formano un cilindro a punta smussa di dimensioni ridotte, come un anoscopio pediatrico. Il diametro interno del ProctoPlus con le valve chiuse è di 14 mm, la divaricazione massima è di 35 mm. Il calibro ridotto a strumento chiuso ne consente l'utilizzo in ambulatorio per diagnosi o piccoli interventi chirurgici in anestesia locale o perianale. È ovviamente indicato l'utilizzo in sala operatoria per interventi più complessi.

Grazie alle contenute dimensioni delle valve, il rischio di trascinare cranialmente la mucosa con l'introduzione dello strumento è minimo. La divaricazione successiva permette di valutare l'eventuale eccesso di mucosa che protrude dalla finestra laterale e dallo spazio che si crea fra le valve stesse.

The left lever is hollow to accommodate a light source. The light beam is magnified and directed precisely to the operating area. The large rectangular fenestration on the right blade allows for intervention on protruding mucosa.

Thanks to the materials used, ProctoPlus is very easy to handle and lightweight providing optimal vision.

When the blades are closed, they form a small, blunt-tipped cylinder, like a pediatric anoscope. The internal diameter of the ProctoPlus with closed blades is 14 mm, and it reaches a maximum distal opening of 35 mm.

This wide range in caliber allows for use in the outpatient setting for diagnostics or minor procedures requiring only topical or perianal anesthesia. It can also be used in the operating room for more invasive procedures under local or general anesthesia.

Thanks to the compact size of the blades, the surgeon avoids the risk of dragging the excess of mucosa into the anal canal upon insertion.

Once opened, the retractor enables clear assessment of any excess mucosa protruding from the lateral window or from the space created between the blades.

REF A.4080.1

Divaricatore anale regolabile, fenestrato, autoilluminante. Monouso e sterile.

Sterilizzato a: ossido di etilene

Confezione: n° 6 pz.

Adjustable, fenestrated, self-lighting anal retractor. Disposable. Sterile.

Sterilised by: ETO

Quantity per box: 6 pcs.

REF A.4080.1.6

Divaricatore anale regolabile, fenestrato, autoilluminante, monouso e sterile e 6 fili di sutura colore viola Assuofil 2/0 ago rinforzato 5/8 C. di 27 mm. Monouso e sterile.

Composto da:

REF A.4080.1 (Divaricatore anale)

+ **REF FU429AT** (6 Fili di sutura) CE0373 - Fabbricante: Assut Europe S.p.A. - via G. Gregoraci,12 - 00173 Roma - Italia - T. +39 06 72677348 - customerservice@assuteurope.com

Sterilizzato a: ossido di etilene

Confezione: n° 6 pz.

Adjustable, fenestrated, self-lighting anal retractor, disposable, sterile and 6 Assuofil 2/0 purple coloured suture threads, reinforced 27 mm needle 5/8 C. Disposable and sterile..

Consists of:

REF A.4080.1 (Anal retractor)

+ **REF FU429AT** (6 threads of suture) CE0373 - Manufacturer: Assut Europe S.p.A. - via G. Gregoraci,12 - 00173 Roma - Italy - Ph. +39 06 72677348 - customerservice@assuteurope.com

Sterilised by: ETO

Quantity per box: 6 pcs.