

eFONA* en situation CICO

Tous les composants dans un seul kit

Emballage compact




Surgicric III

Kit pour la coniotomie percutanée selon la technique de Seldinger

/ Surgicric III

Surgicric III est un kit pour la coniotomie percutanée selon la technique de Seldinger. Le kit permet de sécuriser les voies aériennes en cas d'obstruction des voies aériennes supérieures ou en dernier recours, lorsque toutes les autres tentatives de ventilation du patient ont échoué. Une caractéristique particulière du Surgicric III est la combinaison du tube et du dilateur. Le dilateur est déjà inséré dans le tube, ce qui permet une procédure rapide et facile. Emballé dans une poche à instruments stérile spéciale, le kit offre une vue d'ensemble claire de tous les composants.

Utilisation

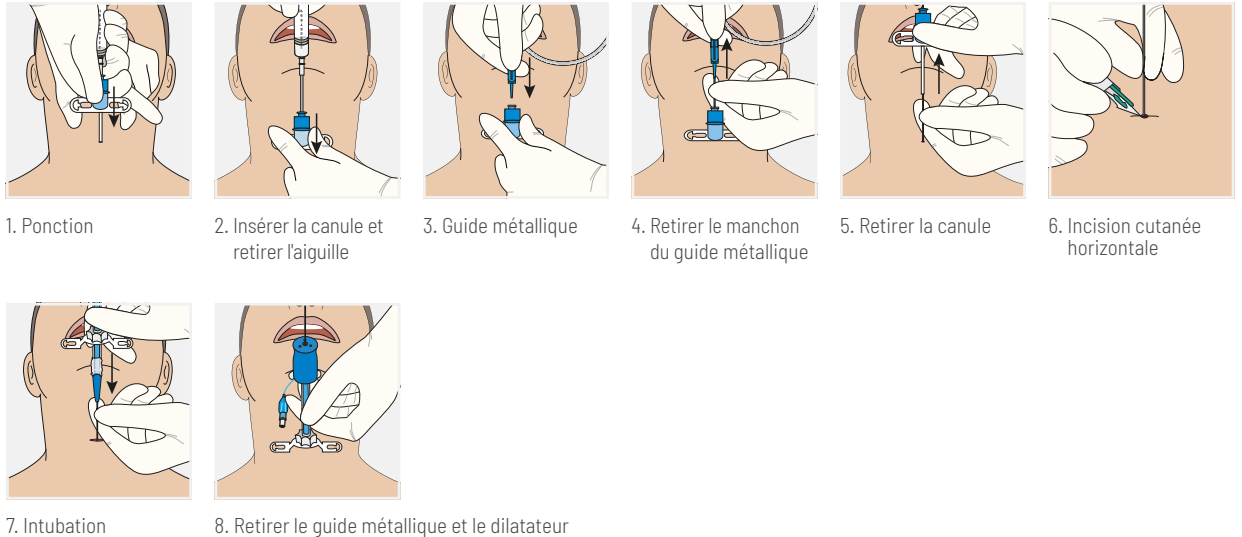

Caractéristiques

Guide métallique

- Extrémité souple en J permettant une introduction atraumatique
- Repères à 10 cm, 20 cm et 30 cm pour orienter la profondeur d'insertion

Lanière

- Fixation sécurisée du tube

Dilateur


- Extrémité souple pour éviter les lésions de la paroi trachéale postérieure
- Ajustage fin entre dilateur et extrémité du tube
- Mécanisme de verrouillage pour éviter les déconnexions intempestives entre dilateur et tube

Sonde D.I. 6.0 mm

- Ballonnet pour la protection des inhalations
- Colerette de fixation mobile
- Atraumatique, extrémité arrondie du tube

Tube d'extension

- Avec aspiration possible ≤ 16 Fr

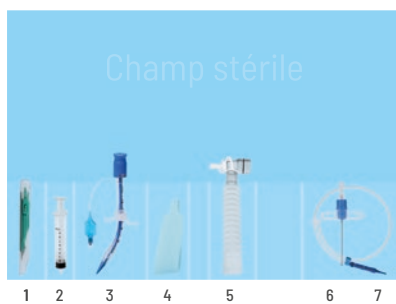

Contenu

- 1 Scalpel # 11
- 2 Seringue 10 ml
- 3 Sonde à ballonnet D.I. 6.0 mm avec dilateur
- 4 Lanière
- 5 Tube d'extension
- 6 Cathéter d'injection (aiguille & canule)
- 7 Guide métallique

Emballage robuste et compact pour s'adapter aux sacs et chariots d'urgence etc.

Dimension emballage :

31.5 cm (L) x 15.2 cm (l) x 5.0 cm (H)

Dimension déplié / champ stérile :

56 cm (L) x 39 cm (l)

Informations pour commander

Surgicric III / Usage unique, stérile

REF	Box
30-08-227-1	1

Information supplémentaire



Vidéo d'application



Flyer coniotomie



Bibliographie commentée

* emergency Front Of Neck Access

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.

Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.