

Forme conique et droite

Code UDI et numéro de série

Profil à faible épaisseur



## Tourniquet Wipe Cuff

Brassard de garrot, réutilisable en désinfection manuelle par essuyage

# / Tourniquet Wipe Cuff

Le Tourniquet Wipe Cuff est un brassard de garrot réutilisable, fabriqué en matériau durable, adapté à une utilisation répétée après une désinfection par essuyage. Le brassard est disponible en forme droite (pour les extrémités supérieures de petite ou moyenne taille) et en forme conique (principalement pour les extrémités inférieures de forme conique) ainsi qu'en différentes tailles, qui sont codées par couleur pour une sélection optimale du brassard en fonction du patient.

## Caractéristiques




### Design du brassard

- Design à faible épaisseur, léger
- Grande bande auto-agrippante pour une fixation fiable du brassard
- Code couleur permet de sélectionner les tailles et commander en toute sécurité
- Tube en silicone résistant à l'écrasement
- Forme conique et droite
- Sans PVC



### Caractéristiques spéciales

- Le matériau spécifique à séchage rapide permet de réutiliser le dispositif sans délai après la désinfection par essuyage
- Code UDI (Unique Device Identifier) pour la traçabilité du dispositif
- Numéro de série pour le suivi de l'utilisation du dispositif
- Retraitable jusqu'à 100 fois (désinfection par essuyage)

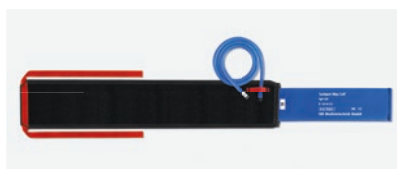


### Forme droite

- Design cylindrique
- Ne présente aucune différence de diamètre entre les parties proximale et distale



### Forme conique

- Design conique avec un diamètre plus petit du côté distal que du côté proximal lors de l'application
- Bloque la circulation sanguine à une pression plus faible grâce à une meilleure adaptation aux extrémités
- Renfort dorsal intégré pour empêcher le glissement du brassard lors du gonflage

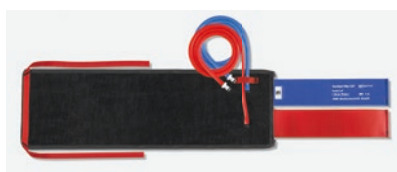

### Brassard double pour anesthésie locorégionale intraveineuse (ALRIV)

- Brassard double avec 2 compartiments gonflables séparément

## Informations pour commander

### Tourniquet Wipe Cuff / Brassard simple, réutilisable

Longueur	Largeur	Couleur	REF	Box
20 cm	7 cm	□	20-75-700	1
30 cm	8 cm	■	20-75-710	1
35 cm	8 cm	■	20-75-711	1
46 cm	10 cm	■	20-75-712	1
46 cm	12 cm	■	20-75-715*	1
61 cm	12 cm	■	20-75-722*	1
76 cm	12 cm	■	20-75-727*	1
86 cm	12 cm	■	20-75-728*	1
107 cm	12 cm	■	20-75-729*	1

### Tourniquet Wipe Cuff / Brassard double, réutilisable

Longueur	Largeur	Couleur	REF	Box
30 cm	12 cm	■	20-77-710	1
46 cm	15 cm	■	20-77-712	1
61 cm	15 cm	■	20-77-722	1

\*Forme conique

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.

Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.